



Bruksanvisning / Brugsanvisning

(Läs hela innan du använder produkten.)

Ett enkelt och bekvämt sätt att skölja näshålorna med saltlösning för att effektivt behandla symtom i samband med allergi, förkylning, influensa eller bihåleinfection.

(Bedes læses helt igennem for brug.)

Den nemme og praktiske måde at skylle næsehulerne på med saltvandsopløsning for at behandle symptomer i forbindelse med allergier, forkølelser, influenza eller infektioner i bihulerne.

Vad är Nasaline[®]?

Nasaline[®] är ett unikt, patenterat, läkemedelsfritt system för nässköljning som har utvecklats av ett team med svenska ÖNH-specialister. Det sköljer enkelt och effektivt bort överflödigt slem, torkat sekret eller allergiframkallande ämnen från näshålorna med hjälp av saltlösningen. Efter att ha vistats en längre tid i torra, dammiga eller rökiga miljöer kan Nasaline[®] användas för att rengöra och lindra näsgångarna, minska irritation i näsan och återfukta slemhinnorna.

Nasaline[®] kan användas för att rengöra och lindra näsgångarna vid:

- Allergier eller torrhet i näsan och hörsnuva.
- Tryck i bihålorna och täthet i näsan.
- Symtom på influensa, förkylning och bihåleinflammation i näsan.
- Baksnuva och nästäppa.
- Irritation i näsan på grund av dammpartiklar på arbetet eller i hemmet, ångor, allergiframkallande partiklar från djur, gräs, pollen, rök osv.
- Nässköljning med saltlösning, fuktgivning och daglig näshygien.
- Efter operation av bihålorna och vid bihålesymtom hos patienter med cystisk fibros.



Fördelar

- Skonsam och bekväm nässköljning med ett jämnt flöde av saltlösning
- Silikonspets som är utformad för att passa barns näsor och passa tätt mot näsborren
- Kanalen inuti spetsen är formad som ett timglas, vilket skapar en skonsam virvel när saltlösningen kommer in i näsan
- Med hjälp av sprutan kan användaren kontrollera flödet för bästa möjliga komfort och effektivitet
- Perfekt för rengöring före användning av läkemedel som tas via näsan
- Enkel att rengöra så att inga bakterier samlas
- Fri från läkemedel och konserveringsmedel; icke-sederande
- En portionsförpackning kan användas som en pH-balanserad och isoton lösning, och två portionsförpackningar kan användas som en hyperton lösning.
- Lämplig för användning efter operation av bihålorna eller under graviditet. Tala med din läkare om du har några frågor.
- Kan enkelt tas med på resor

Vem kan använda Nasaline[®]?

Alla som är 2 år eller äldre kan använda Nasaline[®]. Barn i åldern 2–12 år bör dock inte använda Nasaline[®] utan förälders överinseende, såvida inte barnets läkare ger andra rekommendationer. För barn i åldern 2–12 år föreslår vi den mindre enheten Nasaline[®] Junior, som också ska användas under förälders överinseende.

Dosering

Använd två (2) hela sprutor två gånger i varje näsborre per sköljningstillfälle. Skölj en eller två gånger varje dag eller enligt läkarens rekommendationer.

Hvad er Nasaline[®]?

Nasaline[®] er et unikt og patenteret næseskyllesystem uden lægemidler, der er designet af svenske ÖNH-specialister. Det fjerner uønsket slim, indtørret sekret eller allergener fra næsegangene vha. den nemme brug af saltvandsopløsning. Efter længere ophold i tørre, støvede eller røgfyldte omgivelser renses og blødgør Nasaline[®] næsegangene, nedbringer irritationen i næsen og fugter slimhinderne.

Nasaline[®] kan anvendes til at rense og revitalisere næsegangene, der er påvirket af følgende:

- Allergier i næsen, tørhed og høfeber.
- Tryk i bihulerne og stoppet næse.
- Symptomer i næsen som følge af influensa, forkølelse og bihulebetændelse.
- Dryp fra næsen og tilstoppet næse.
- Irritation i næsen som følge af støv i hjemmet eller på arbejdspladsen, dampe, skæl fra dyr, græs, pollen, røg osv.
- Næseskyllning med saltvand, fugtning og daglig næsehygiejne.
- Til brug efter et kirurgisk indgreb i bihulerne og ved symptomer i bihulerne, som patienter med cystisk fibrose lider af.



Fordele

- Nænsom og behagelig skylning af næsen med blødt flow og saltvandsopløsning
- Silikonspidsen er designet, så den passer til alle børns næser og slutter helt tæt om næseborrsåbningen
- Kanalen indvendigt i spidsen er formet som et timeglas, der skaber en lille hvirvelstrøm, når saltvandsopløsningen løber ind i næsen
- Sprøjten giver brugeren mulighed for at styre flowet, så man får en så optimal behagelig og effektiv oplevelse som muligt
- Perfekt til rensning før brug af lægemidler til næsen
- Nem rensning for at forebygge bakterieophobning
- Uden lægemidler og konserveringsmidler, efterlader ingen rester
- Kan anvendes som en pH-balanceret og isotonisk opløsning med en pakke eller som en hypertonisk opløsning med to pakker.
- Egnet til brug efter et kirurgisk indgreb i bihulerne eller under graviditet. Kontakt din læge i tilfælde af spørgsmål
- Egnet til rejser

Hvem kan benytte Nasaline[®]?

Alle fra 2 år og opefter kan benytte Nasaline[®]. Børn i alderen mellem 2 og 12 år bør dog ikke anvende Nasaline[®] uden opsyn fra forældrene, medmindre dette er en anvisning fra dit barns læge. Vi anbefaler Nasaline[®] Junior, der er en mindre enhed, til børn i alderen mellem 2 og 12 år, der også bør anvendes under opsyn fra forældrene.



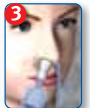
Dosering

Brug to (2) fyldte sprøjter to gange i hvert næsebor til hver skyllesession. Skyl en eller to gange dagligt, eller som din læge har anbefalet dig.

Rengöring

Ta bort spetsen, dra ut kolven ur sprutan och skölj alla tre delarna med varmt vatten. Nasaline[®]-applikatorn kan även rengöras med mildt diskmedel. Torka alla tre delarna. När de är torra ska Nasaline[®]-enheten förvaras med kolven inuti cylindern.

Tre enkla steg

1. Töm en portionsförpackning (0,5 tsk) Nasaline[®]-salt i måttet. 
2. Fyll måttet upp till 240 ml-strecket med vatten som är destillerat, mikrofiltrerat (genom 0,2 mikrometer), kommersiellt flaskvatten eller vatten som har kokats och kylts ned till rumtemperatur eller kroppstemperatur. Rör om så att saltlösningen blandas ordentligt. Dra upp all saltlösning i Nasaline[®]-applikatorn. 
3. Stå (eller sitt) över ett handfat eller använd produkten i duschen. Placera silikonspetsen mot näsan så att den täcker över hela näsborren. Andas normalt genom munnen (eller säg "aaaah") och tryck långsamt upp saltlösningen i näsborren. Undvik att svälja. När saltlösningen når näshålorna bakre del stängs gommen automatiskt som en reflex. Saltlösningen fyller upp näshålorna och rinner sedan ut genom den andra näsborren. Utför denna process två gånger i varje näsborre. Använd en näsduk för att snyta ut saltlösning som kan finnas kvar i näsan. En del av saltlösningen kan bli kvar i näsan och sippra ut senare. Du kan undvika detta genom att luta huvudet framåt och åt sidorna direkt efter sköljningen. 

⚠ VARNING

 **ANVÄND INTE KRANVATTEN, SÅVIDA DET INTE HAR STERILISERATS GENOM KOKNING**

- Av säkerhetsskäl ska du inte använda kranvatten för att lösa upp blandningen, såvida det inte först har kokats i minst fem minuter och därefter kylts ned, eftersom vattnet blir sterilt när det kokas. Du kan också använda vatten som är destillerat, mikrofiltrerat (genom 0,2 mikrometer) eller filtrerat genom omvänd osmos eller kommersiellt flaskvatten.
- Varje enhet får endast användas av en person. Dela inte produkten med andra.
- Följ rengöringsprotokollet efter varje användningstillfälle. Rengöringsanvisningar finns i den medföljande broschyren.
- Byt ut enheten senast tre månader efter den första användningen.
- Skölj näsan försiktigt.
- Innan du använder produkten måste du läsa alla varningar i den medföljande broschyren, eller på vår webbplats: www.neilmed.com/directions. På webbplatsen finns alltid de senaste varningarna.
- Förvara produkten svalt och torrt.



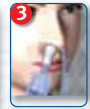
OB!

Enligt medicinsk forskning bör rengöringsprotokollet som beskrivs i sin helhet i den medföljande broschyren om Nasaline[®] utföras efter varje användning och enheten bör bytas ut efter tre månader. **Kvavningsrisk: små delar – förvaras utom räckhåll för barn!**

Rengöring

Fjern spidsen, træk stemplet ud af sprøjten, og skyl alle 3 dele med varmt vand. Nasaline[®] applikatoren kan også rengøres med et mildt opvaskemiddel. Tør alle 3 dele. Når Nasaline[®] enheden er tør, bør den opbevares med stemplet sat i cylinderen.

Tre nemme trin

1. Hæld 1 pose (1/2 teskefuld) Nasaline[®] salt i blandedekoppen. 
2. Fyld blandedekoppen op til 240 ml-stregen med destilleret, mikrofiltreret (gennem 0,2 mikron) vand købt på flaske eller forinden kogt og afkølet vand, der er afkølet til lunken temperatur eller kropstemperatur. Omrør for at blande saltvandsopløsningen korrekt. Sug saltvandsopløsningen helt ind i Nasaline[®]-applikatoren. 
3. Stå (eller sid) over en badeværelsesvask, eller brug brusekabinen. Sæt silikonspidsen mod næsen, så den lukker helt tæt omkring næseborrene. Træk vejret normalt gennem munden (eller sig aaaah...), og tryk saltvandsopløsningen langsomt op i næsen. Undgå at synke. Når saltvandsopløsningen når det bageste af næsegangene, lukker ganen pr. refleks. Saltvandet fylder næsegangene og fortsætter med at løbe ud af det andet næsebor. Udfør denne proces to gange i hvert næsebor. Brug en serviet eller lignende til at puste eventuelle rester af saltvand ud af næsen. Noget af saltvandet kan blive i næsen og dryppe ud senere. Læg dit hoved fremefter, og drej det fra side til side lige efter skylningen for at undgå dette. 

⚠ ADVARSEL

 **UNDLAD AT BRUGE POSTEVAND, MEDMINDRE DET ER STERILISERET VED KOGNING**

- Med henblik på din egen sikkerhed bør du ikke anvende postevand eller ledningsvand til at opløse blandingen, medmindre det forinden er blevet kogt i fem minutter eller længere tid (og derefter kølet af), da kogningen steriliserer vandet. Andre muligheder er destilleret vand, mikrofiltreret vand (gennem 0,2 mikron), vand filtreret via omvendt osmose eller købt vand på flaske.
- Hver enhed må kun anvendes af en og den samme bruger. Du må ikke dele dette produkt med andre.
- Følg rengøringsprotokollet efter hver brug af produktet. Rengøringsanvisningerne kan findes i den medfølgende brochure.
- Udskift enheden efter tre måneder fra den første brug.
- Skyl næsen forsigtigt.
- Før du anvender dette produkt, skal du læse de detaljerede advarsler, der findes i den medfølgende brochure, eller på vores hjemmeside: www.neilmed.com/directions. Vores hjemmeside har altid de nyeste og opdaterede advarsler.
- Skal opbevares et køligt og tørt sted.

OB!

Den medicinske forskning anbefaler følgende rengøringsprotokol, der beskrives komplet i den medfølgende brochure til Nasaline[®], efter hver brug og udskiftning af udstyret efter tre måneder. **Fare for kvælning: Små dele. Skal opbevares uden for børns rækkevidde!**



Käyttöohjeet / Návod na použitie

(Lue kokonaan ennen käyttöä.)

Mukava ja helppo tapa huuhdella nenäontelot suolaliuksella allergioihin, nuhaan, flunssaan tai sivuontelotulehdukseen liittyvien oireiden tehokasta hoitoa varten.

(Pred použitím prečítajte.)

Jednoduchý a pohodlný spôsob vyplachovania nosnej dutiny solným roztokom na účinnú liečbu symptómov alergií, prechladnutia, chrípky alebo infekcií prínosových dutín.

Mikä on Nasaline®?

Nasaline® on ainutlaatuinen, patentoitu, lääkkeetön nenähuuhtelujärjestelmä, jonka on suunnitellut ruotsalaisista korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäreistä koostuva ryhmä. Se huuhtelee tehokkaasti ei toivotun liman, kovettuneet eritteet tai allergenit nenäontelosta helpolla suolaliuksen käytöllä. Pitkittyneen oleskelun jälkeen kuivassa, pölyisessä tai saivuisessa ympäristössä Nasaline® puhdistaa ja rauhoittaa nenäkäytäviä vähentäen nenän ärsytystä ja kosteutta limakalvoja. Nasaline®-tuotetta voi käyttää puhdistamaan ja rauhoittamaan nenäkäytäviä seuraavissa tilanteissa:

- Nenän allergiat, kuivuus ja heinänuha
- Sivuntelopaine ja tukkoinen nenä
- Flunssan, nuhan ja poskiontelotulehduksen nenäoireisiin
- Nenänielun limaisuus ja nenän tukkoisuus
- Työ- ja kotipölyn, pakokaasujen, eläinhilseen, heinän, siitepölyn, savun, jne. aiheuttama nenä-ärsytys
- Nenähuuhteluun suolaliuksella, kosteutekseen ja päivittäiseen nenähygieniaan
- Käytettäväksi sivuonteloleikkauksen jälkeen ja kystistä fibroosia sairastavien potilaiden sivuonteloi-oreisiin.



Edut

- Hellävarainen, mukava ja sujuva nenähuuhtelu suolaliuksella
- Silikonikärki on suunniteltu sopimaan kaikkien lasten nenään tiivistäen täysin sierainaukon.
- Kärjen sisällä kulkeva kanava on tiimalasin muotoinen ja se tuottaa hellävaraisen pyörteisen virtauksen keittosuolaliuksen kulkeutuessa nenään.
- Ruiskutoiminnon avulla käyttäjä voi hallita virtausta optimaalisen mukavuuden ja tehokkuuden takaamiseksi
- Erinomainen puhdistukseen ennen nenän kautta otettavien lääkkeiden ottamista
- Helppo puhdistaa bakteerien kerääntymisen estämiseksi.
- Lääkkeetön ja säilöntäaineeton: ei-sedatiivinen
- Voidaan käyttää pH-tasapainotettuna ja isotonisena liuoksena yhdellä paketilla tai hypertonisena liuoksena kahdella paketilla.
- Sopii käytettäväksi sivuonteloleikkauksen jälkeen tai raskauden aikana: kysy neuvoa lääkäriltäsi, jos sinulla on huolia
- Helppo kantaa mukana matkustettaessa

Kuka voi käyttää Nasaline®-tuotetta?

Kaikki vähintään yli kaksivuotiaat voivat käyttää Nasaline®-tuotetta. 2–12-vuotiaiden lasten ei tule kuitenkaan käyttää Nasaline®-tuotetta ilman vanhempien valvontaa, ellei lapsen lääkäri ole neuvonut toisin. Suosittelemme Nasaline® Junior -tuotetta, pienempää laitetta, 2–12-vuotiaille lapsille, myös vanhempien valvonnassa käytettäväksi.

Annostus

Käytä kaksi (2) täyttä ruiskua kaksi kertaa kuhunkin sieraimen huuhtelukerran aikana. Huuhtelee kerran tai kaksi kertaa päivässä tai lääkärin suosituksen mukaisesti.

Čo je Nasaline®?

Nasaline® je jedinečný, patentovaný systém na vyplachovanie nosa navrhnutý švédskymi ORL špecialistami, ktorý neobsahuje žiadne liečivá. Pomocou solného roztoku účinne odplavuje z prínosových dutín nežiadúci hlien, husté sekréty alebo alergény. Po dlhšom pobyte v suchom, prašnom a zadymenom prostredí Nasaline® vyčistí a upokojí nosnú dutinu, znižuje podráždenie nosa a zvlhčí sliznicu. Nasaline® sa môže používať na čistenie a uvoľnenie nosových ciest, ktoré trápia:

- Alergie, suchosť a senná nádcha.
- Tlak v dutinách a upchatý nos.
- Ťažkosti v nose spôsobené chrípkou, prechladnutím a zápalom prínosových dutín.
- Kvapkanie z nosa a upchatie nosa.
- Podráždenie nosa spôsobené prachom v pracovnom a domácom prostredí, výparmi, zvieracou srstou, trávou, peľom, dymom, atď.
- Zvlhčovanie a denná hygiena nosa solným roztokom.
- Na použitie po operácii dutín a pri ťažkostiach s dutinami u pacientov s cystickou fibrózou.



Výhody

- Šetrné, pohodlné a plynulé zvlhčovanie nosa solným roztokom.
- Silikonová špička je navrhnutá tak, aby pasovala na všetky detské nosy a utesnila nosné dierky.
- Kanálik v špičke je v tvare presýpacích hodín a keď sa solný roztok dostane do nosa, vytvára jemný vírivý prúd.
- Funkcia striekačky umožňuje vďaka ovládaniu prietoku optimálny komfort a účinnosť.
- Vynikajúci na prečistenie pred použitím nosových liekov.
- Jednoduché prečistenie ako prevencia pred hromadením baktérií.
- Bez pridaných liečiv a konzervantov; nemá utlmujúci účinok.
- Môže sa použiť ako izotonický roztok s vyváženým pH s jedným balením alebo hypertonický roztok s dvoma baleniami.
- Vhodný na použitie po operácii prínosových dutín alebo počas tehotenstva; v prípade obáv sa poraďte so svojím lekárom.
- Prenosný a vhodný na cestovanie.

Kto môže Nasaline® používať?

Nasaline® môže používať ktokoľvek starší ako 2 roky. Deti vo veku 2 – 12 rokov by však Nasaline® nemali používať bez dohľadu rodičov, ak pediater neurčí inak. Pre deti od 2 do 12 rokov odporúčame používať menšiu jednotku Nasaline® Junior, taktiež pod dohľadom rodičov.

Dávkovanie

Použite dve (2) plné striekačky dvakrát do každej nosnej dierky pri každom vyplachovaní. Vypláchnite raz alebo dvakrát denne alebo podľa odporúčania vášho lekára.

Puhdistaminen

Poista kärki, vedä mäntä ulos ruiskusta ja huuhtele kaikki kolme osaa lämpimällä vedellä. Nasaline®-applikaattorin voi puhdistaa myös miedolla tiskiaineella. Kuivata kaikki kolme osaa. Kun osat ovat kuivia, säilytä Nasaline®-yksikkö mäntä runkoon asetettuna.

Kolme helppoa vaihetta

1. Tyhjennä 1 paketti (½ teelusikallista) Nasaline®-suolaa sekoitusastiaan.
2. Laita sekoitusastiaan 240 ml tislattua tai mikro-suodatettua (0,2 mikronin läpi) vettä, kaupallista pullovetä tai aikaisemmin keitettyä ja haaleaksi jäädytettyä vettä. Sekoita suolaliuos kunnolla. Vedä suolaliuos kokonaan Nasaline®-applikaattoriin.
3. Seiso (tai istu) lavaarin yllä tai käytä suihkussa. Aseta silikonikärki nenää vasten siten, että se tiivistää sieraimen kokonaan. Hengitä normaalisti suun kautta (tai sano aaaa) ja työnnä suolaliuos hitaasti sieraimen. Älä niele. Kun suolaliuos saavuttaa nenäonteloiden takaosan, suulaki sulkeutuu automaattisesti refleksinomaisesti. Suolaliuos täyttää nenäontelot ja kulkeutuu ulos toisen sieraimen kautta. Toista kaksi kertaa kummallekin sieraimelle. Käytä nenäliinaa puhaltaksesi ulos mahdolliset suolaliuosjäämät nenästäsi. Osa suolaliuksesta voi jäädä nenään ja valua ulos myöhemmin. Tämän voi estää kallistamalla päätä eteenpäin ja sivuille välittömästi huuhtelun jälkeen.



VAROITUS

ÄLÄ KÄYTÄ HANAVETTÄ ELLEI SITÄ STERILOIDA KEITTÄMÄLLÄ

- Oman turvallisuutesi varmistamiseksi älä käytä hanavettä sekoituksen liuottamiseen, ellei sitä ole ensin keitetty vähintään viiden minuutin ajan (ja sitten jäädytetty), sillä keittäminen steriloi veden. Muut vaihtoehdot ovat tislattu, mikro-suodatettu (0,2 mikronin läpi), käänteisosmoosisuodatettu tai kaupallinen pullovesi.
- Vain yhden käyttäjän tulee käyttää laitetta. Älä käytä sitä yhdessä muiden kanssa.
- Noudata puhdistusohjeita jokaisen käyttökerran jälkeen. Puhdistusohjeet löytyvät mukana toimitetusta esitteestä.
- Vaihda laite kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä käytöstä.
- Huuhtelee nenä hellävaraisesti.
- Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava yksityiskohtaiset varoitukset oheisesta esitteestä tai verkkosivuiltamme osoitteessa: www.neilmed.com/directions. Verkkosivumme varoitukset ovat aina ajan tasalla.
- Säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.

HUOMIO

Lääketieteellinen tutkimus suosittelee noudattamaan Nasaline®-tuotteen mukana toimitetussa esitteessä kuvailtuja puhdistuskäytäntöjä jokaisen käytön jälkeen ja vaihtamaan laitteen kolmen kuukauden jälkeen.

Tukehtumisvaara: Pienet osat. Pidettävä poissa lasten ulottuvilta!

Čistenie

Vyberte špičku, zo striekačky vyťahnite piest a prepláchnite všetky 3 časti teplou vodou. Aplikátor Nasaline® je možné vyčistiť aj jemným saponátom. Všetky 3 časti vysušte. Po vysušení uskladnite Nasaline® s piestom vloženým do valca.

Tri jednoduché kroky

1. Do nádoby na zmiešanie vсыpte 1 balenie (½ čajovej lyžičky) soli Nasaline®.
2. Nádobku na zmiešanie naplňte po hranicu 8 oz/240 ml destilovanou, mikrofiltrovanou (cez 0,2 mikronu), komerčne balenou alebo vopred prevarenou a vychladenou vodou alebo vodou, ktorej teplota je rovnaká ako teplota tela. Solný roztok dôkladne premiešajte. Všetko množstvo roztoku naberte do Nasaline® aplikátora.
3. Použite v stojí (alebo sede) pri umývadle alebo v sprche. Silikonovú špičku priložte k nosu tak, aby celkom utesnila nosnú dierku. Dýchajte normálne cez ústa (alebo hovorte aaaaa...) a solný roztok pomaly vytlačajte do nosnej dierky. Neprehltajte; keď sa solný roztok dostane do zadnej časti prínosných dutín, podnebie sa vďaka reflexu automaticky uzavrie. Solný roztok naplní prínosové dutiny a vytečie druhou nosnou dierkou. Tento proces vykonávajte dvakrát pre každú nosnú dierku. Pomocou vreckovky vyfúkajte z nosa zvyšný solný roztok. Časť solného roztoku môže v nose ostať a vytiecť neskôr. Môžete tomu predchádzať tak, že hneď po vypláchnutí predkloníte hlavu a budete ňou otáčať zo strany na stranu.

VAROVANIE

NEPOUŽÍVAŤ VODU Z VODOVODU, POKIAL NIE JE STERILIZOVANÁ PREVARENÍM.

- Pre vašu bezpečnosť nepoužívajte na rozpustenie zmesi vodu z vodovodu, ak sa predtým minimálne päť (a viac) minút nevarila, pretože varením sa voda sterilizuje. Ďalšou možnosťou je destilovaná voda, mikrofiltrovaná (cez 0,2 mikronu), filtrovaná reverznou osmózou alebo balená voda.
- Každé zariadenie môže používať iba jedna osoba; tento výrobok s nikým nezdieľajte.
- Po každom použití výrobku dodržujte postup čistenia. Návod na čistenie nájdete v priloženej brožúre.
- Po troch mesiacoch od prvého použitia výrobok vymeňte.
- Jemne si prepláchnite nos.
- Pred použitím tohto výrobku si musíte prečítať podrobné varovania v priloženej brožúre alebo na našej webovej stránke na www.neilmed.com/directions. Na našej webovej stránke sa varovania vždy aktualizujú.
- Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

UPOZORNENIE

Na základe lekárskeho výskumu sa odporúča nasledujúci postup čistenia po každom použití, ktorý je celý opísaný v priloženej brožúre výrobku Nasaline® a výmena zariadenia po troch mesiacoch.

Nebezpečenstvo zadusenía: Malé časti; Uchovávajte mimo dosahu detí!